

Canister isolante Kaye

PER VALPROBE® RT



PANORAMICA

I data logger ValProbe RT utilizzano batterie adatte alle alte temperature, ma anche le batterie migliori possono resistere al calore solo fino a 140°C. Per questo motivo, abbiamo creato un contenitore progettato per consentire al ValProbe RT di funzionare in modo sicuro in condizioni di alta temperatura, come nei tunnel di deprogenazione e nei forni a calore secco.

Il canister utilizza un isolamento sottovuoto, estendendo la gamma delle sonde ValProbe di tipo pieghevole, che possono essere utilizzate in modo sicuro a temperature fino a 360°C. Il materiale isolante proprietario offre un design compatto e a basso profilo, rendendo il contenitore isolante adatto alle applicazioni di convalida termica più impegnative.

Da utilizzare con i logger di temperatura pieghevoli ValProbe RT a uno, due e 5 canali.

APPLICAZIONI

- Tunnel di deprogenazione
- Forni a calore secco
- Camere di temperatura

CARATTERISTICHE

- Il materiale isolante proprietario estende notevolmente il campo di funzionamento di ValProbe RT
- Design a basso profilo per l'utilizzo in applicazioni con limitazioni di spazio (45 mm di diametro X 149 mm di lunghezza)
- Robusta struttura in acciaio inox 316 SS


Specifiche del canister isolante

PRESTAZIONI (TEMPO DI ESPOSIZIONE MASSIMO)

Temperatura	Logger a 1 e 2 canali	Logger a 5 canali
360°C	40 min	35 min
300°C	60 min	55 min
250°C	90 min	80 min
200°C	120 min	120 min
170°C	180 min	180 min

DIMENSIONI

Numero di canali	Numero di parte	Diametro	Lunghezza
1 e 2	X2545	45 mm (1,75 in)	149 mm (5,87 in)
5	X2545-5CH	45 mm (1,75 in)	149 mm (5,87 in)

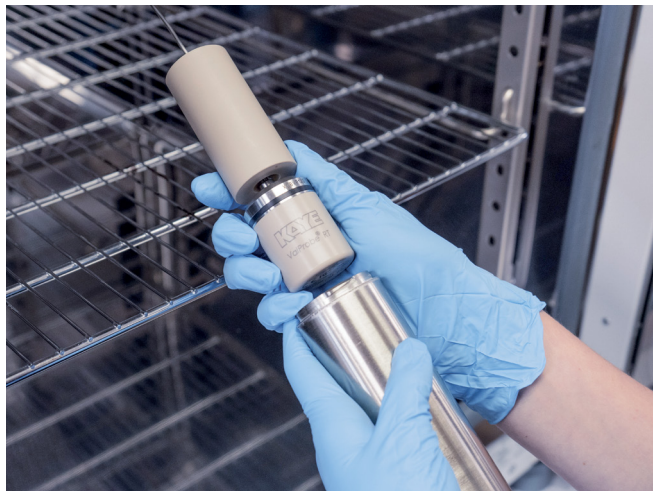

Contatto del rappresentante Kaye:

EUROPA, MEDIO ORIENTE, AFRICA E ASIA

Amphenol Advanced Sensors Germany GmbH
Sinsheimer Strasse 6
D-75179 Pforzheim
T: +49 (0) 7231-14 335 0
F: +49 (0) 7231-14335 29
Email: kaye@amphenol-sensors.com

USA/ AMERICHE

Amphenol Thermometrics, Inc.
967 Windfall Road
St. Marys, PA 15857
T: +1(814) 834-9140
F: +1(814) 781-7969
Email: kaye-us@amphenol-sensors.com

INDIA

Amphenol Interconnect India Pvt Ltd.
Plot no. 6, Survey No.64 | Software Units layout
MAHAVEER TECHNO PARK
Hitech City, Madhapur | Hyderabad,
Telangana – 500081 | T: +91 40 33147100
Email: kaye-india@amphenol-sensors.com

CINA

Amphenol (Changzhou) Connector
Systems Co., Ltd, Building 10,
Jintong Industrial Park, No. 8 Xihu Road,
Wujin High-Tech Development Zone,
Changzhou, Jiangsu 213164
T: 0086-519-83055197

KAYE
FILIALE DI AMPHENOL

Garanzia ed esclusione di responsabilità: Le informazioni riportate sui documenti si basano sui nostri test, sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. A causa di l'effetto di possibili influenze nell'applicazione del prodotto, non esonerano l'utente da test, verifiche e prove proprie. Dai nostri dati non è possibile ricavare una garanzia di determinate proprietà o una garanzia di idoneità del prodotto per un'applicazione specifica, in particolare permanente. La responsabilità è pertanto esclusa nella misura consentita dalla legge. I diritti di proprietà di terzi e le leggi e i regolamenti vigenti devono essere rispettati dal destinatario del prodotto sotto la propria responsabilità.

© 2024 Amphenol Corporation. Tutti i diritti riservati. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Altri nomi di società e prodotti utilizzati in questo documento sono marchi registrati o marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.